

## ・「使用準備完了ランプ」の状態を毎日確認する

・緑色のランプが点滅していれば使用可能な状態です。ランプが消灯している場合は、注意が必要です。また、HS1からピープ音が聞こえiボタンが点滅している場合は、iボタンを押して音声メッセージの指示に従ってください。それでも問題が解決しない場合は、AEDコールセンターへご連絡下さい。

こちらが点滅することを  
毎日確認して下さい。  
(2～3秒間隔で点滅します)




「スタンバイモード(正常時)」

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

## \* バッテリー装着セルフテスト (何か問題が起こったら、まずはこちらを行ってください)

・パッドカートリッジが本体に装着されていることを確認の上、バッテリーを装着して下さい。自動的にセルフテストが開始されます。音声メッセージに従って、セルフテストを完了して下さい。次にAEDがスタンバイ状態になることを確認して下さい。

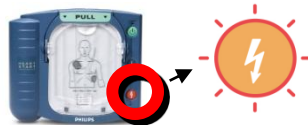


「セルフテストです。緊急の場合は緑の電源ボタンを押して下さい。」

「オレンジのボタンが点滅したらボタンを押して下さい。テストは完了しました。テスト中です・・・」

「使用できます。緊急の場合は緑の電源ボタンを押して下さい。」

## 1 緑のハンドルを引くと電源が入ります。


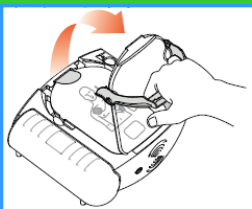


※未就学児の場合は小児用パッドを使用します。(オプション)



「まず上半身の衣服を全て脱がせて下さい、脱がせにくければ破いて下さい。」

## 2 電極パッドを体に貼ります。

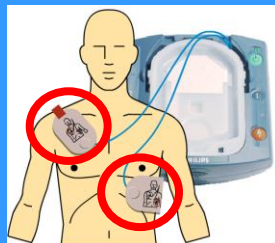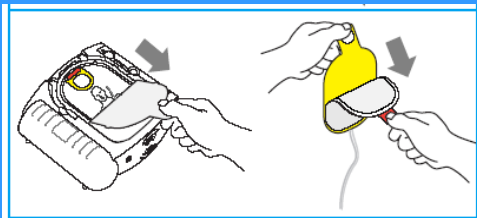

2つのパッドを貼るとAEDが自動で解析を開始します。

「身体に触れないで下さい、解析中です。」

**ショックが必要な場合**

**ショックが不要な場合**


「ショックが必要です。身体から離れて下さい。」

「ショックは不要です。」  
「119番に電話して、救急車を呼んだことを確認して下さい。」

「身体に触れても大丈夫です。」

「心肺蘇生を開始して下さい。」

## 3 ショックボタンを押します。


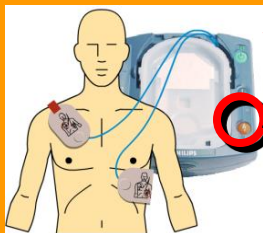


**電気ショック**



「点滅しているオレンジのボタンを押して下さい。」  
「ショックが完了しました。」  
「119番に電話して、救急車を呼んだことを確認して下さい。」  
「身体に触れても大丈夫です。」  
「直ちに心肺蘇生を開始して下さい。」  
「心肺蘇生法の手順が知りたければ点滅する青いボタンを押します。」

## ・全体の流れ

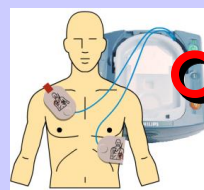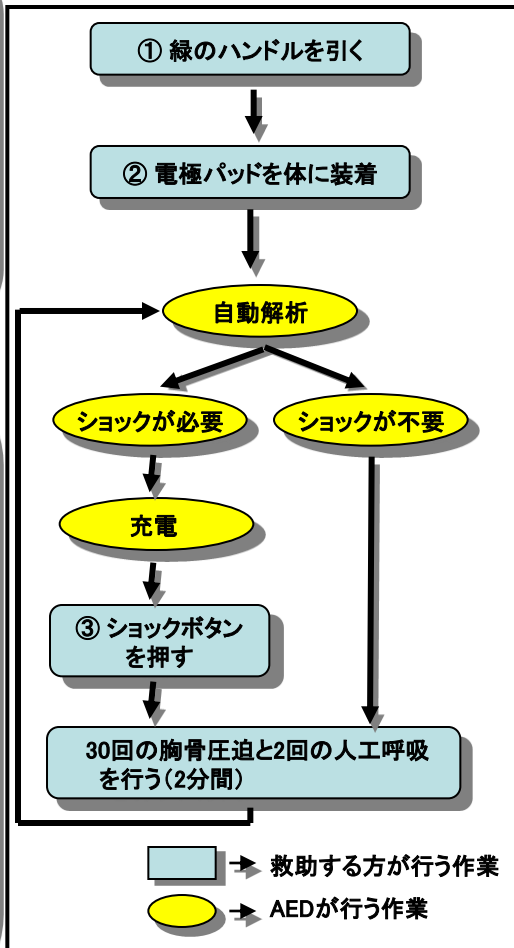

胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を交互に2分間行います。

※人工呼吸ができない場合は、胸骨圧迫だけが続けます



**\* 救急車が到着するまでAEDの電源は入れたまま！  
電極パッドは貼ったままにして下さい！！**

