

フクダ電子はAEDの普及に努め、地域社会に貢献します

フクダ電子グループ住所一覧

北海道販売株

本社 〒060-0013 北海道札幌市中央区北13条西17-1-35
TEL.(011)737-3171 FAX.(011)737-2010
函館営業所 〒040-0012 北海道函館市時任町20-12
TEL.(0138)55-6097 FAX.(0138)55-6194
旭川営業所 〒078-8215 北海道旭川市5条通20-1717-104
TEL.(0166)32-6970 FAX.(0166)32-6977
釧路営業所 〒085-0026 北海道釧路市寿3-4-23
TEL.(0154)32-1171 FAX.(0154)32-1173
帯広出張所 〒080-0026 北海道帯広市西16条南1-18-5
TEL.(0155)58-1810 FAX.(0155)58-1820
北見出張所 〒090-0048 北海道北見市北8条西1-15
TEL.(0157)22-6620 FAX.(0157)69-6970

北東北販売株

本社 〒010-0955 秋田県秋田市山王中島町8-10
TEL.(018)862-2991 FAX.(018)864-3675
弘前営業所 〒036-8104 青森県弘前市大字扇町1-3-6 101号
TEL.(0172)27-4331 FAX.(0172)27-4339
八戸営業所 〒031-0813 青森県八戸市大字新井田字西平1-67
TEL.(0178)30-2911 FAX.(0178)25-8980
盛岡営業所 〒020-0051 岩手県盛岡市下太田下川原12-1
TEL.(019)656-2200 FAX.(019)656-2266

南東北販売株

本社 〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-8-12
TEL.(022)224-1175 FAX.(022)225-4484
山形営業所 〒990-0022 山形県山形市東山形1-11-14
TEL.(023)622-5916 FAX.(023)622-5913
福島営業所 〒960-8132 福島県福島市東浜町10-3
TEL.(024)534-5822 FAX.(024)531-7132
郡山営業所 〒963-0551 福島県郡山市喜久田町字菖蒲池10-2
TEL.(024)963-2115 FAX.(024)959-2330

新潟販売株

本社 〒950-0954 新潟県新潟市中央区美咲町1-7-12
TEL.(025)284-1126 FAX.(025)283-5448
長岡営業所 〒940-2117 新潟県長岡市石動南町28-13
TEL.(0258)46-1201 FAX.(0258)46-1204

北関東販売株

本社 〒320-0856 栃木県宇都宮市砥上町1649-2
TEL.(028)649-3114 FAX.(028)649-0888
高崎営業所 〒370-0018 群馬県高崎市新保町1684-1
TEL.(027)384-8500 FAX.(027)352-8511

西関東販売株

本社 〒338-0013 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2-760
TEL.(048)762-3335 FAX.(048)762-3338
川越営業所 〒350-0034 埼玉県川越市仙波町3-16-13 ウェルズ211川越B03
TEL.(049)223-8000 FAX.(049)223-8001

南関東販売株

本社 〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港5-33
TEL.(043)241-3111 FAX.(043)241-3711
水戸営業所 〒310-0851 茨城県水戸市千波町298
TEL.(029)305-6333 FAX.(029)305-6334
つくば営業所 〒305-0821 茨城県つくば市春日3-5-6
TEL.(0298)51-2741 FAX.(0298)55-7565
東葛営業所 〒270-1176 千葉県我孫子市栄崎台1-7-3
TEL.(04)7181-2011 FAX.(04)7181-2015

東京販売株

本社 〒112-0002 東京都文京区小石川14-14-24
TEL.(03)3830-0620 FAX.(03)3830-0622

東京中央販売株

本社 〒113-8570 東京都文京区湯島2-31-20 春木町ビル7F
TEL.(03)3812-9415 FAX.(03)3812-9416

東京西販売株

本社 〒190-0011 東京都立川市高松町1-23-17
TEL.(042)525-3578 FAX.(042)527-7262

神奈川販売株

本社 〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町905
TEL.(045)717-6175 FAX.(045)717-9230
静岡営業所 〒422-8046 静岡県静岡市駿河区中島347
TEL.(054)283-6211 FAX.(054)283-6221
浜松営業所 〒433-8118 静岡県浜松市中央区高丘西1-14-31
TEL.(053)436-2471 FAX.(053)438-0671
沼津営業所 〒410-0052 静岡県沼津市沢田町10-8
TEL.(055)924-7861 FAX.(055)924-7860

北陸販売株

本社 〒920-8203 石川県金沢市般若5-200
TEL.(076)239-3005 FAX.(076)239-3010
富山営業所 〒939-8221 富山県富山市八日町234-1
TEL.(076)428-0333 FAX.(076)428-0321
福井営業所 〒918-8237 福井県福井市和田東2-1312
TEL.(0776)26-3739 FAX.(0776)26-3722

長野販売株

本社 〒381-2205 長野県長野市青木島町大塚866-1
TEL.(026)291-0100 FAX.(026)291-0131
山梨営業所 〒400-0047 山梨県甲府市德行3-13-23
TEL.(055)222-6655 FAX.(055)222-6465
松本営業所 〒399-8205 長野県安曇野市豊科5737
TEL.(0263)47-5500 FAX.(0263)47-6464

中部販売株

本社 〒452-0805 愛知県名古屋市中西区市場木町390 ミュキビジネスパーク三号館
TEL.(052)509-1101 FAX.(052)509-1151
岡崎営業所 〒444-0871 愛知県岡崎市大西1-13-5
TEL.(0564)24-2781 FAX.(0564)25-1157

三岐販売株

本社 〒500-8265 岐阜県岐阜市西部神清寺1-67
TEL.(058)272-9611 FAX.(058)272-9618
三重営業所 〒514-0104 三重県津市栗真小川町字中沢778
TEL.(059)232-6500 FAX.(059)232-6144

京滋販売株

本社 〒612-8379 京都府京都市伏見区南寝小屋町25
TEL.(075)605-6050 FAX.(075)605-6051
滋賀営業所 〒520-3046 滋賀県栗東市大橋4-6-40
TEL.(077)553-1617 FAX.(077)553-2165

近畿販売株

本社 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-12-28 大昇ビル3F
TEL.(06)6190-3100 FAX.(06)6190-3535
堺営業所 〒590-0959 大阪府堺市堺区大町西1-1-25
TEL.(072)221-6171 FAX.(072)223-8519
奈良営業所 〒634-0075 奈良県橿原市小房町12-37
TEL.(0744)24-2161 FAX.(0744)25-6139
和歌山営業所 〒640-8392 和歌山県和歌山市中之島1581
TEL.(073)433-1291 FAX.(073)422-1536
田辺営業所 〒646-0027 和歌山県田辺市朝日ヶ丘21-1 ハートビル302号室
TEL.(0739)25-2723 FAX.(0739)25-2723

兵庫販売株

本社 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町6-5-3
TEL.(078)302-3001 FAX.(078)302-3008
姫路営業所 〒670-0952 兵庫県姫路市南条526
TEL.(079)223-0474 FAX.(079)281-5498

岡山販売株

本社 〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野715-103
TEL.(086)241-8688 FAX.(086)243-6633
岡山営業所 〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野715-103
TEL.(086)241-5400 FAX.(086)241-8396
鳥取出張所 〒680-0904 鳥取県鳥取市勝福431
TEL.(0857)38-3018 FAX.(0857)32-8550
米子営業所 〒683-0035 鳥取県米子市目久美町90-11
TEL.(0859)38-1313 FAX.(0859)38-1223
出雲営業所 〒693-0004 島根県出雲市渡橋町1197
TEL.(0853)27-9021 FAX.(0853)27-9607
益田出張所 〒698-0025 島根県益田市あけぼの西町13-3
TEL.(0856)22-8560 FAX.(0856)22-8535

広島販売株

本社 〒733-0841 広島県広島市西区井口明神1-1-31
TEL.(082)276-7227 FAX.(082)276-7228
広島営業所 〒733-0841 広島県広島市西区井口明神1-1-31
TEL.(082)276-7227 FAX.(082)276-7228
福山営業所 〒720-0822 広島県福山市川口町4-20-12
TEL.(084)954-7511 FAX.(084)954-7512
山口営業所 〒754-0026 山口県山口市小郡栄町1-10
TEL.(083)972-3071 FAX.(083)972-3077
周南営業所 〒745-0806 山口県周南市桜木3-5-77
TEL.(0834)28-0150 FAX.(0834)28-0114

四国販売株

本社 〒790-0963 愛媛県松山市小坂3-4-5
TEL.(089)986-4000 FAX.(089)986-4100
徳島営業所 〒770-0004 徳島県徳島市南田宮2-7-4
TEL.(088)631-9317 FAX.(088)631-9316
高松営業所 〒761-8071 香川県高松市伏石町2002-8
TEL.(087)865-4321 FAX.(087)865-4323
高知営業所 〒781-0085 高知県高知市礼場7-27
TEL.(088)880-1411 FAX.(088)885-1350

西部北販売株

本社 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2-2-70
TEL.(092)473-7343 FAX.(092)472-2107
福岡営業所 〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田2-2-70
TEL.(092)473-7741 FAX.(092)473-0039
北九州営業所 〒805-0034 福岡県北九州市八幡東区清田2-5-20
TEL.(093)653-3055 FAX.(093)653-3370
久留米営業所 〒830-0003 福岡県久留米市東櫛原町607-1
TEL.(0942)32-8119 FAX.(0942)32-8117
筑豊営業所 〒820-0070 福岡県飯塚市堀池字堤満268-1
TEL.(0948)24-7719 FAX.(0948)24-7729
佐賀営業所 〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3-4-31
TEL.(0952)31-5519 FAX.(0952)31-5520
長崎営業所 〒852-8145 長崎県長崎市昭和3-256-20
TEL.(095)842-8055 FAX.(095)842-8060
佐世保営業所 〒859-3223 長崎県佐世保市広田2-210-1
TEL.(0956)39-2291 FAX.(0956)39-2297

西部南販売株

本社 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山2-5-27
TEL.(096)382-6170 FAX.(096)382-9840
熊本営業所 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山2-5-27
TEL.(096)382-6166 FAX.(096)382-6466
大分営業所 〒870-0850 大分県大分市賀来西1-10-13
TEL.(097)549-5066 FAX.(097)549-5139
宮崎営業所 〒880-0841 宮崎県宮崎市吉村町大田ヶ島甲402-3
TEL.(0985)23-5625 FAX.(0985)23-5617
鹿児島営業所 〒891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町5-12
TEL.(099)230-7739 FAX.(099)230-7743
沖縄営業所 〒901-1117 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1356-2
TEL.(098)995-9715 FAX.(098)995-9716

(2024年9月現在)

自動体外式除細動器

フクダ電子

オートショックAED

AEDベネハート C2オート

医療機器承認番号:30500BZX00238000



AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

AED設置者及び管理者は品質保証及び安全管理の為、以下の内容の確認をお願いいたします。

1. AED設置の際はAED管理者を設置し、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理する事。特にバッド・バッテリーの使用期限の確認及び、期限内の交換は確実に実施する事。
2. AED設置者及び管理者は、AED管理表示ラベル上に明記された消耗品等の使用期限を確認する事。
3. AED設置者及び管理者は、AEDに不測の事態が発生した時及び、譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、廃棄時には、製造販売業者又は販売業者等の連絡先に連絡する事。製造販売業者又は販売業者からの情報提供方法等(交換時期のお知らせ等)について確認する事。
4. 電極バッドは使い捨てなので、再使用する事は禁止である。
5. 導入の際には必ず添付文書をご確認ください。

一般的名称:非医療従事者向け自動除細動器
販 売 名:BeneHeart Cシリーズ
オートショック

高度管理医療機器 特定保守管理医療機器

製造販売業者

フクダ電子株式会社

〒113-8483 東京都文京区本郷3-39-4

本製品に関するお問い合わせは、下記アドレスがQRコードまたはフクダグループ各営業所までお問い合わせください。

<https://pages.fukuda.co.jp/aed.html>



- 本製品(ソフトウェアを含む)を日本国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請等必要な手続をお取りください。
- 仕様や機構の一部が変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
- 撮影・印刷インキの関係で実際の色と異なって見えることがあります。

ご使用の前に...

- 添付文書および取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

C1P1071CK Cat.No.249S26(Ⓚ)

FUKUDA DENSHI

1分でも1秒でも早く、ひとりでも多くの命を救えたら

⚡ 様々な場所で起こりうる「突然の心停止」

日本において突然の心停止発生者数は**年間約9万人以上***ともいわれており、多くの大切な命が失われています。突然の心停止の主な原因は「**心室細動**」と呼ばれる心臓がけいれんした状態になることです。

早急に処置を行わなければ数分以内に死に至ります。

心室細動に対する最も有効な治療方法は「**除細動**」…つまりAEDによる電気ショックです。

⚡ 迅速な除細動の重要性

除細動が1分遅れるごとに救命率は**約7～10%**低下します。

⚡ 救急車の到着までにできること

救急車を呼んでから現場に到着するまで全国平均で**約10分***かかります。


その場に居合わせた発見者「バイスタンダー」による

1分、1秒でも早い電気ショックが救命の鍵を握っています。

*総務省消防庁令和5年版救急救助の現況より引用



救急車待ってたら間に合わないよ!

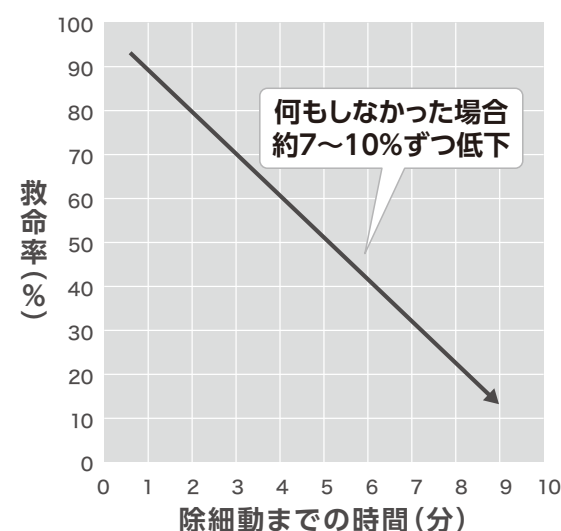

AHA心臓蘇生と救急心血管治療のための国際ガイドライン2000より引用

⚡ ベネハートC2オートは迅速な救命処置をサポートします




**7インチ大画面で
操作手順を指示**

アニメーションと音声で
操作手順を救助者にガイドします。
明るさ自動調整で
見やすい画面。

ショックが
必要と判断したら
自動でカウント
開始

**AUTO
SHOCK**
オートショック

ベネハートCシリーズにはQShock™テクノロジーを搭載。1秒でも早い除細動を実現し除細動の成功率をたかめることができます。

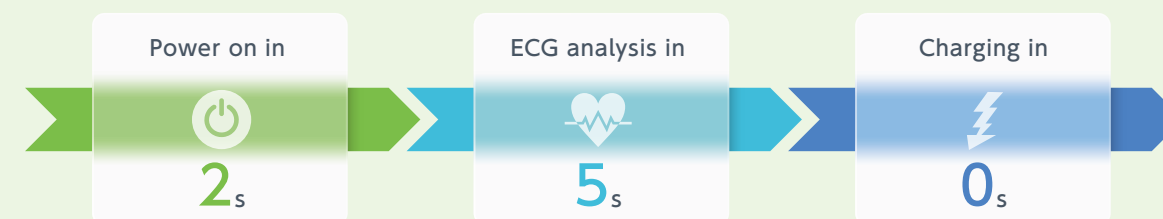

※新品バッテリー、初回200J、20℃環境の場合


ベネハートCシリーズは解析開始からカウントまで **5秒以内**を実現*

※20℃環境および小学生～大人モードの初回ショックの場合

オートショックAEDについて 知ってほしいこと

救命のためには電気ショック実行が重要

AEDの設置は進んできましたが、現在の日本では電気ショック実行までたどり着く件数が少ないと言われています。電気ショック実行時と未実行時の1か月後生存率は大きな差があり、オートショックAEDはその最も重要な電気ショック実行を自動で行うことで、ユーザー起因のショック未実行を防ぐことができます。

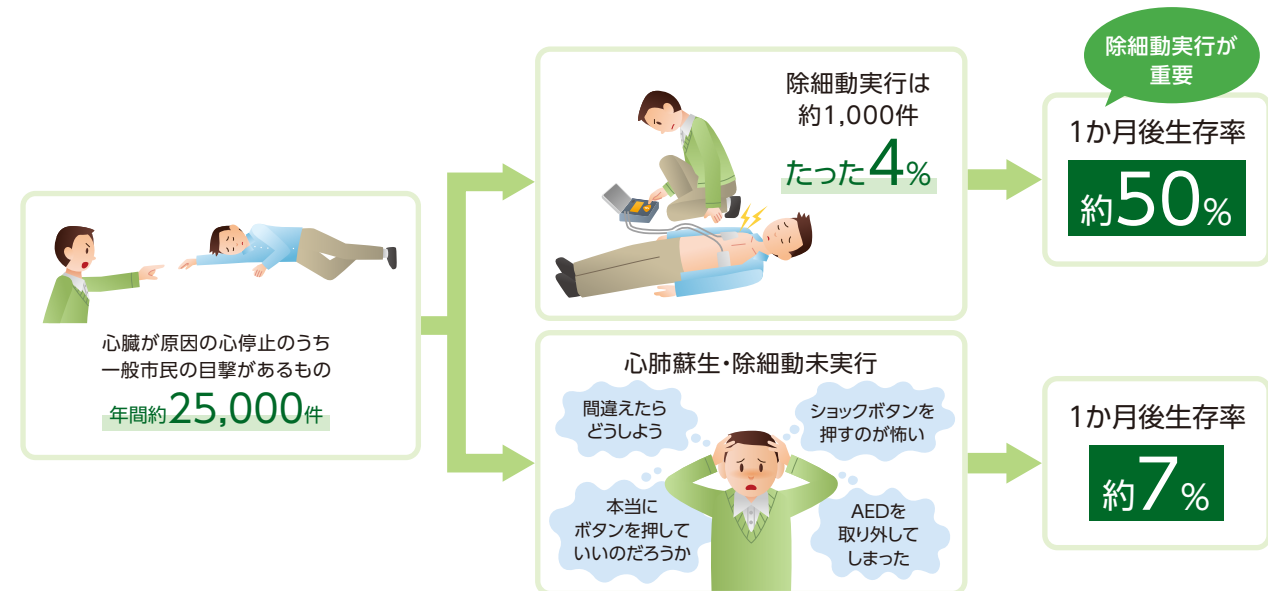

※総務省消防庁『令和5年版 救急救助の現況』より

オートショックAEDとは

オートショックAEDは電気ショックが必要な時に自動で実行します。つまりバイスタンダーは心肺蘇生を行うだけで、ショックボタンを押す必要はありません。これにより電気ショックの早期実行やバイスタンダーの精神的負担の軽減が期待されます。



オートショックAED導入のメリット

- 自動でショックが実行される
- 迅速にショック実行できる
- バイスタンダーの精神的負担を軽減できる

自動のショックによって
操作者の心理的負担を軽減します。

一般的なAED※

ショックボタンあり
操作者がショックボタンを押す必要あり

※ショックボタンを有するAED

オートショックAED


ショックボタンなし
ショックが必要な時は自動でカウント開始

3.2.1...



一般的なAEDとの違い

ベネハートC2オートは大画面カラー液晶で操作者にわかりやすくガイダンスします。

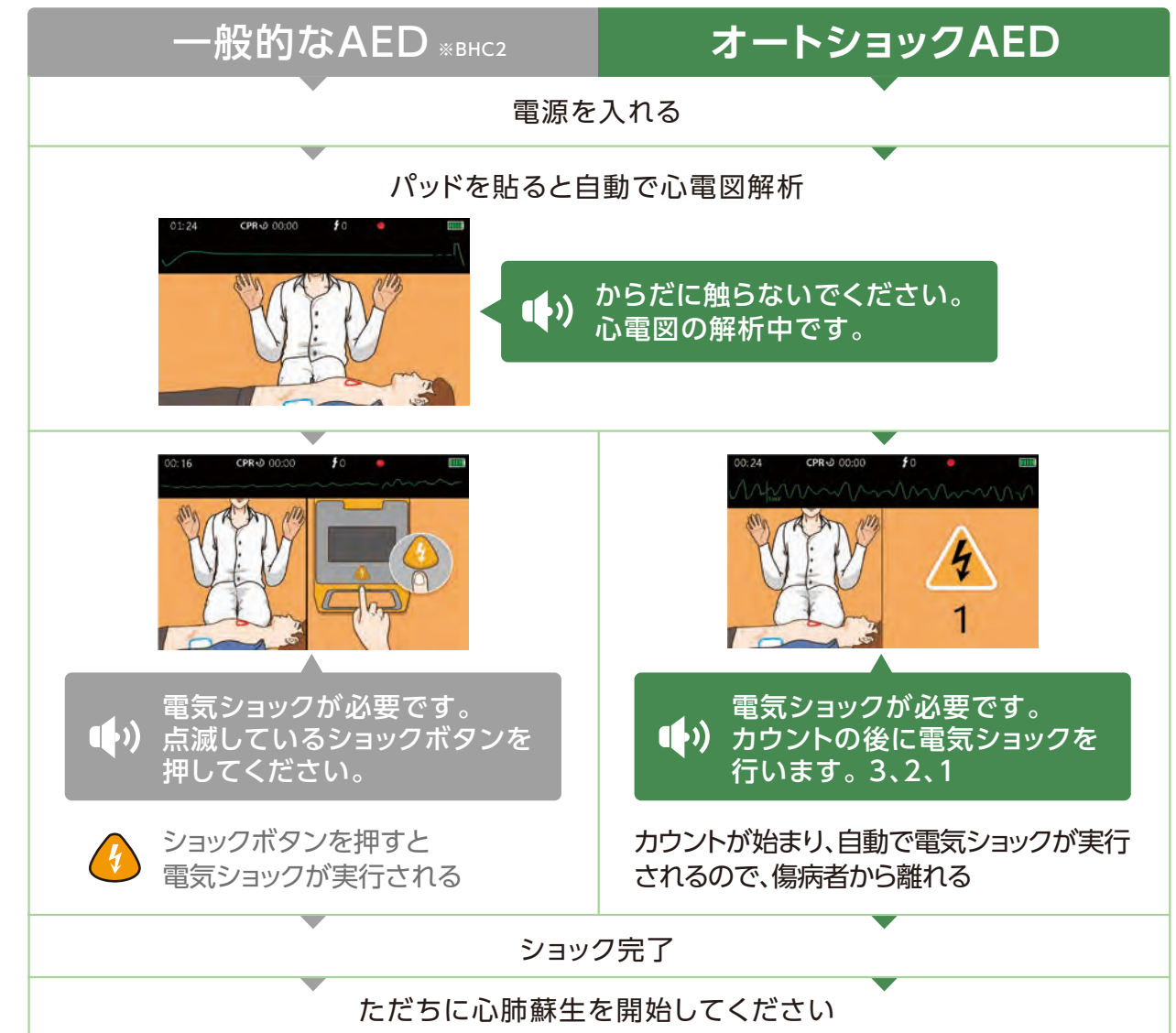

オートショックAEDの使い方を映像で見ましょう ▶



オートショックAEDのロゴマーク

バイスタンダーがオートショックAEDだと認識しやすいよう、メーカーで統一して使用されています。

だれでも使用できるように

- POINT
01

オートショック

AEDが自動で電気ショックを実行してくれます。
- POINT
02

大画面カラー液晶で救助者をサポート

7インチ、TFTカラー液晶を採用。音声ガイダンスに加え、視覚的にも救助者をサポートします。初めて操作する人にもわかりやすいAEDです。
- POINT
03

バイリンガル機能

いつでも音声を「日本語⇄英語」に切り替えられます。
- POINT
04

毎日のセルフテスト

パッドの導通テスト等のセルフテストを実施。いつ起こるかわからない有事に備えます。
- POINT
05

切替スイッチで未就学児へ対応

小学生～大人/未就学児モード切替スイッチを採用。パッドを共通使用でスピーディに切り替えができ、迅速な救助を実現します。
- POINT
06

心肺蘇生ガイダンス

胸骨圧迫のリズムと人工呼吸のタイミングを音声でガイドします。
画面上でも案内がでますので、救助者の心肺蘇生への不安を軽減します。
- POINT
07

心電図波形表示

医療従事者が使用する場合、より適切な医療的処置を施すことができます。

いつでもどこでも使用できるように

防塵防水性能 IP55

1.5m耐落下性能

耐振動性能

➤ オプション

ベネハートキャリングバッグ
BH-CB

AED救急セットBH (はさみ付き)
AEDQQ-BH

ベネハート トレーナー
125-000248
※液晶はついておりません。
※本体用単三電池8本、リモコン用単四電池2本は別売
交換 ベネハート トレーナー交換用パッド 100-000206
部品 ベネハート トレーナー交換用パッドケーブル 100-000208

➤ スペック・規格

品名	AEDベネハートC2 オート
型式	BHC2-AS
製品構成	本体、バッテリー、除細動パッド
波形	二相性切断指数 (BTE) 波形、患者インピーダンスに合わせて自動補正
エネルギー	200J、300J、360J (小学生～大人モード) 50J、70J、100J (未就学児モード)
寸法	21.9 cm×28.6 cm×7.8 cm
質量	2.3kg バッテリー含む
保管温度	0℃～50℃
動作温度	-5℃～50℃
録音	周囲音を録音する
データストレージ	最大5時間のECG波形、500件のイベント、1時間の録音、5時間のCPRデータ
言語	日本語、英語 (日本語で起動)
防塵防水性能	IP55
バッテリー	
タイプ	リチウムバッテリー (12V、4200mAh) ※充電不可
容量	12時間以上稼働、200Jで270回放電
待機寿命	装着から4年2か月 (新品を使用した場合。設置環境や使用状況により待機寿命は変わります。)

✔ 消耗品

AEDベネハート用パッド 共通
MR60
医療機器届出番号: 13B1X00003500132
販売名: 除細動パッド MR シリーズ

AEDベネハート用バッテリー
LM345002A

保証延長サービス ベネハートの保証期間は通常5年です。ご購入と同時にオプションの保証期間延長サービス (BH3YL) にご加入頂いた場合は、保証期間を延長し、8年の保証期間となります。

JRC蘇生ガイドライン2020対応

未就学児等への適用

●未就学児に使用する場合には2枚のパッドが触れ合うことのないよう注意すること。